

KN95

MÁSCARA PROTECTORA



MODEL: KN95


ARTÍCULO: KN95 MÁSCARA PROTECTORA

USOS Y APLICACIONES:

Adecuado para la protección contra polvo, PM2.5 smog, partículas, bacterias de la gripe, saliva, polvo, etc. La máscara facial es buena para pruebas de viento y la protección de la cara contra el frío.

MATERIAL:

5-Capas Tela no tejida + Tela fundida por soplado

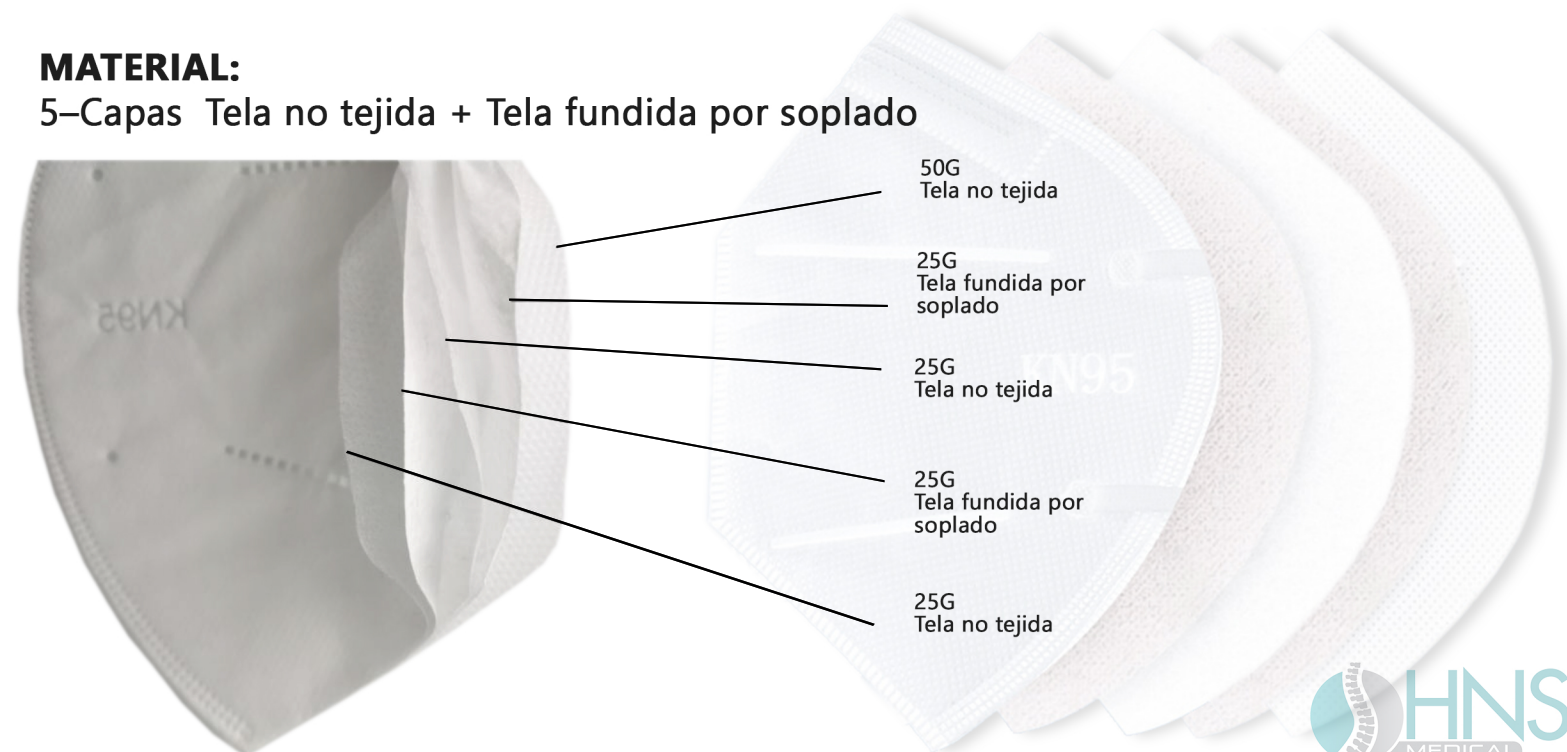

KN95

MÁSCARA PROTECTORA



ESTÁNDAR EJECUTIVO GB 2626-2006

EFICIENCIA DE FILTRADO DE PARTÍCULAS >95%

KN95

INFORME DE ENSAYO: W202004085

CERTIFICADO DE PRUEBA DE FILTRACIÓN: GB 2626-2006

DONGYANG JIASENG INDUSTRIAL CO., LTD

EFICIENCIA DE FILTRACIÓN: GB 2626-2006 6.3 VALOR ESTÁNDAR: >95% OBTENIDO 99%

RESISTENCIA DE RESPIRACIÓN: GB 2626-2006 6.5 6.6

INSPIRATORIA Pa VALOR ESTÁNDAR <350. VALOR MEDIO 161

EXPIRATORIA Pa VALOR ESTÁNDAR <250. VALOR MEDIO 140

TEMPERATURA DE ALMACENAJE:

Temperatura -10°C -40°C , humedad <80%

Almacene en un lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL: Tres años

KN95

MÁSCARA PROTECTORA



DETALLES:



PRECAUCIONES:


1. Este producto no se puede utilizar para prevenir gases nocivos.
2. Deseche la mascarilla cuando esté suficientemente sucio o la resistencia a la respiración aumente notablemente.
3. Evite almacenar el producto en un entorno de alta temperatura, humedad o productos químicos nocivos.
4. Los niños en edad preescolar o los pacientes con anomalías respiratorias no pueden usarlo.
5. No es adecuado para su uso en ambientes con gases tóxicos o concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5%.
6. No se puede utilizar en horno microondas.

FABRICANTE:

DONGYANG JIASHENG INDUSTRIAL CO., LTD
Con Certificación CE

KN95

MÁSCARA PROTECTORA

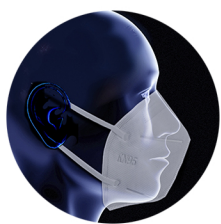


RESPIRACIÓN LIBRE

**DISEÑO 3D, CONFORTABLE Y
TRANSPIRABLE.**

Más cerca de la cara para una protección más estricta. Suave y transpirable, ideal para pieles sensibles y alergias.


INSTRUCCIONES DE USO:

ESTIRE LA MÁSCARA FACIAL

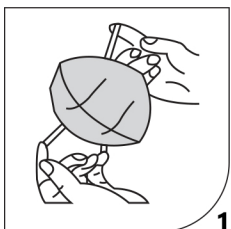


1

COLOQUE EL GANCHO EN EL OÍDO

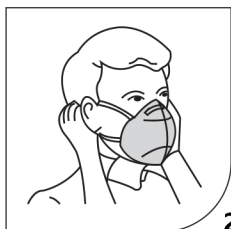


2

AJUSTE Y PRESIONE LA PIEZA DE LA NARIZ

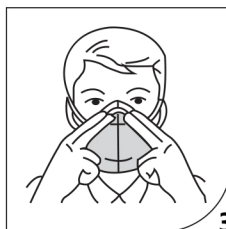

3

ASEGÚRESE DE CUBRIR EL MENTÓN

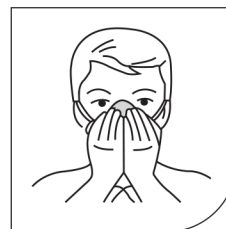

4