

# MÁSCARA FACIAL



**MODELO:** Estándar: YY/T 0969-2013

**ARTÍCULO:** Máscara Facial


**USOS Y APLICACIONES:**

Uso ordinario, uso médico.

**NUESTRAS VENTAJAS:** Estándares estrictos y confiables de alta calidad con certificado ISO, FDA & CE, experiencia durante muchos años, buen ambiente de trabajo y capacidad de producción estable.

**MATERIAL:**

Tela de polipropileno, Tela fundida por soplado (Filtro)

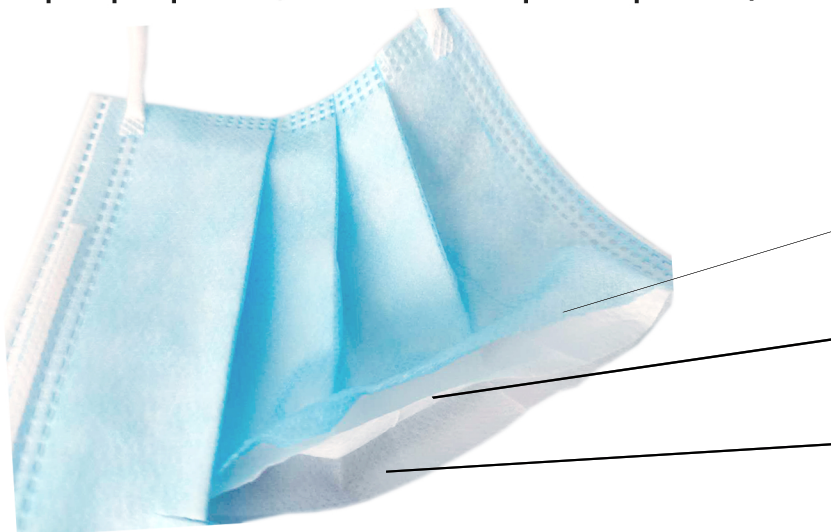

25G  
Tela de polipropileno

25G  
Tela fundida por soplado (Filtro)

25G  
Tela de polipropileno

# MÁSCARA FACIAL



## COMPOSICIÓN:

Capa externa	25g/m <sup>2</sup> Tela de polipropileno PP
Capa de filtro	25g/m <sup>2</sup> Tela fundida por soplado (Filtro)
Capa interna	25g/m <sup>2</sup> Tela de polipropileno PPF

## ESTÁNDAR: YY/T 0969-2013

BFE ≥ 99%

FEM ≥ 99%

## CERTIFICADO: CE, ISO, FDA

## EFICIENCIA DE FILTRACIÓN (BFE): ≤ 95%

## RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE: ≤ 49 Pa/cm<sup>2</sup>

## COLOR: Azul/Blanco

## TAMAÑO: 17.5\*9.5 cm (Adulto) – 14.5\*9.5 cm (Damas/Niños) – 12.9\*9 cm (Niños pequeños)

## CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS TÉCNICAS:

- Detección de la eficacia de filtración y resistencia respiratoria.
- Experimento de eficiencia de filtración.
- Prueba de resistencia respiratoria.
- Prueba de penetración sanguínea sintética.
- Prueba de hermeticidad.

# MÁSCARA FACIAL



**MÁS CERCA DE LA CARA PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN. FÁCIL DE RESPIRAR**

1. Soldadura ultrasónica firme.
2. Estructura de tres capas desplegadas.
3. Banda elástica.
4. Clip de puente nasal incorporado.

## INSTRUCCIONES DE USO:

La barra de la nariz se debe encontrar hacia arriba. Coloque la máscara sobre su nariz y boca

Ponga los elásticos sobre sus oídos, despliegue la máscara completamente. Eso asegurará la máxima protección de la cara

Presione el clip de puente nasal para minimizar la fuga de aire

Quítese la máscara agarrando los elásticos y sacándolos de las orejas. No toque la máscara ya que puede contener gérmenes. Deseche la máscara después de usarla y lávese las manos cuidadosamente



# MÁSCARA FACIAL



## DETALLES:



## FABRICANTE:

XIANTAO DINGCHENG NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD.  
Con Certificación FDA