




**MODELO:** TICARE TC 1107

**ARTÍCULO:** Máscara Facial

**USOS Y APLICACIONES:**  
Uso ordinario, uso médico.

**NUESTRAS VENTAJAS:** Estándares estrictos y confiables de alta calidad con certificado ISO, FDA & CE, experiencia durante muchos años, buen ambiente de trabajo y capacidad de producción estable.

**MATERIAL:**  
Tela de polipropileno, Tela fundida por soplado (Filtro)

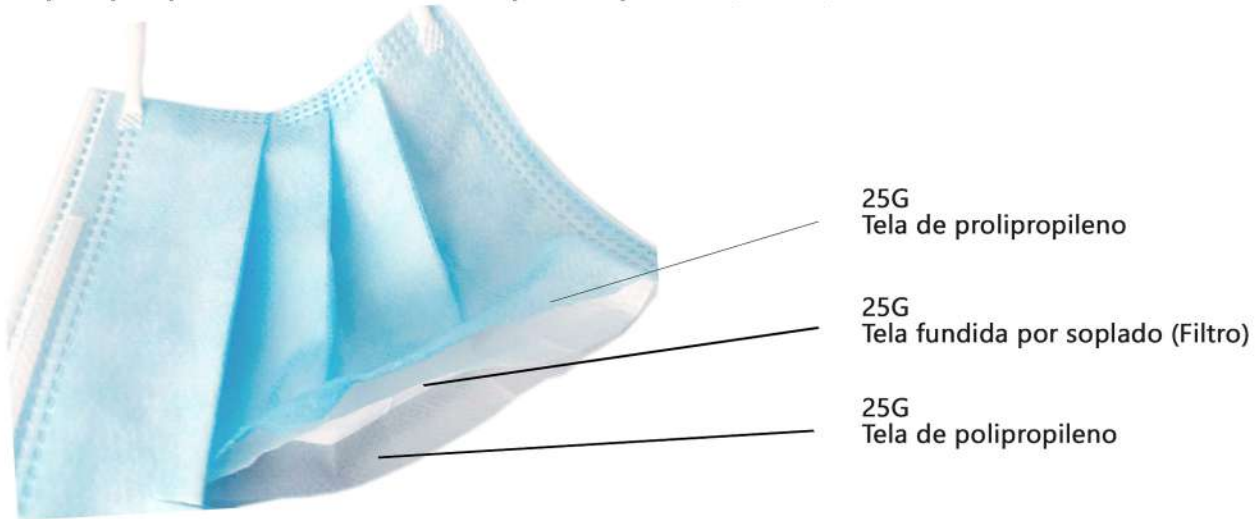

## COMPOSICIÓN:

Capa externa 25g/m2 Tela de polipropileno PP  
Capa de filtro 25g/m2 Tela fundida por soplado (Filtro)  
Capa interna 25g/m2 Tela de polipropileno PPF

**ESTÁNDAR:** YY/T 0969-2013

BFE ≥ 99%

FEM ≥ 99%

**CERTIFICADO:** CE, ISO, FDA

**EFICIENCIA DE FILTRACIÓN (BFE):** <=95%

**RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE:** <=49 Pa/cm<sup>2</sup>

**COLOR:** Azul/Blanco

**TAMAÑO:** 17.5\*9.5 cm (Adulto) – 14.5\*9.5 cm (Damas/Niños) – 12.9\*9 cm (Niños pequeños)

## CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS TÉCNICAS:

- Detección de la eficacia de filtración y resistencia respiratoria.
- Experimento de eficiencia de filtración.
- Prueba de resistencia respiratoria.
- Prueba de penetración sanguínea sintética.
- Prueba de hermeticidad.



## MÁS CERCA DE LA CARA PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN. FÁCIL DE RESPIRAR

1. Soldadura ultrasónica firme.
2. Estructura de tres capas desplegadas.
3. Banda elástica.
4. Clip de puente nasal incorporado.

## INSTRUCCIONES DE USO:

La barra de la nariz se debe encontrar hacia arriba. Coloque la máscara sobre su nariz y boca



Ponga los elásticos sobre sus oídos, despliegue la máscara completamente. Eso asegurará la máxima protección de la cara



Presione el clip de puente nasal para minimizar la fuga de aire



Quítese la máscara agarrando los elásticos y sacándolos de las orejas. No toque la máscara ya que puede contener gérmenes. Deseche la máscara después de usarla y lávese las manos cuidadosamente





**DETALLES:**



**Manufacturado en China para JHC MEDICA ®**